

KIT KOMETA ME 2


SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE: KIT KOMETA ME 2 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 2 CON REGOLAZIONE E MATERASSO KOMET PRESS STANDARD GREEN A BOLLE D'ARIA.

CODICE ISO: 03.33.06.018

CODICE Nr.: 855771

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 761547/R.**

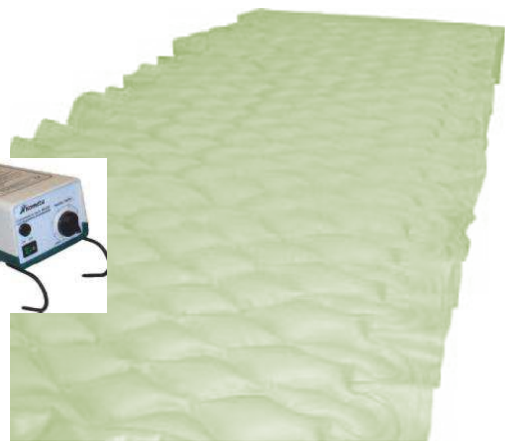

MATERIALE: COMPRESSORE ME 2 CON REGOLAZIONE, IN PVC, E MATERASSO STANDARD GREEN A BOLLE D'ARIA IN POLIVINILCLORURO (W/EN-71) CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO, ATOSSICO. AUSILIO ANTIDECUBITO UTILIZZABILE SOPRA IL NORMALE MATERASSO. IL COMPRESSORE CONSENTE IL GONFIAGGIO DI ALCUNI SEGMENTI E CONTEMPORANEAMENTE LO SGONFIAGGIO DI ALTRI, IN MODO PROGRAMMABILE A SECONDA DEL PESO DEL PAZIENTE E DELLE ESIGENZE (TRAMITE IL REGOLATORE DI PRESSIONE). LA SCATOLA DEL COMPRESSORE E' IN ABS, DOTATA DI DOPPIO GANCIO PER APPENDERLO AL LETTO. POTENTE E SILENZIOSO E' OTTIMO PER UN UTILIZZO A DOMICILIO.

Compressore Kometa ME 2 con regolatore di pressione

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 331282/R**
- **Tensione e frequenza:** 230 V / 50 Hz.
- **Potenza assorbita** : < 10W
- **Aria in uscita:** 6 lt
- **Range di pressione:** 110 mm/Hg
- **Ciclo:** 10 minuti
- **Peso apparecchio:** Kg 1,6
- **Rumorosità:** < 40 dB
- **Cavo di alimentazione:** si (3 m)
- **Dimensioni:** cm 25,5 X 11,4 X 7,5

Materasso a bolle d'aria "Standard green" cod. 855574

- **REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr. 331277 /R**
- **Materiale** : PVC (W/EN-71), termosaldato, con trattamento antibatterico ATOSSICO
- **Dimensioni:** 200 x 86 x 6,35 cm gonfiato
- **Altezza sezione:** cm 6,35
- **Numero celle:** 130
- **Spessore:** 0,28 mm
- **Peso:** Kg 2,2
- **Portata massima:** Kg 100

APPLICAZIONE: INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-BASSO RISCHIO di DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI

